

Female Catheter



*e*catalogue 

Aximed Female catheter adalah alat medis yang digunakan khusus untuk wanita yang dapat membantu proses pengosongan kandung kemih.

Product Features :

- Dari bahan medical non-toxic, non-iritan PVC, transparan, dan halus.
- Panjang selang 20 cm sesuai dengan ukuran saluran kemih pada wanita.
- Desain ujung menutup tanpa sudut melindungi dari resiko trauma.
- Dua lubang lateral dengan ukuran besar memaksimalkan drainase urin.

Ukuran : 12, 14, 16, 18

Kemasan : 20 pcs / box

Distribusi Oleh :


AXION Healthindo
PT. Bio Axion Healthindo

Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G No. 39-42,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.15 8, RT.8/RW.6, Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12420

Cara Penggunaan Female Catheter




e catalogue 

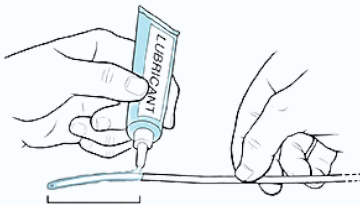


1

Cuci tangan dan lumasi kateter dengan water-soluble lubricating jelly sepanjang 5-10 cm.

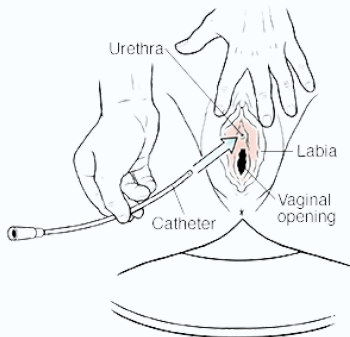

2

Masukkan kateter secara perlahan ke dalam uretra anda sekitar 5-10 cm. Jika tidak masuk, tariklah napas dalam-dalam dan tahanlah seolah-olah Anda ingin buang air kecil.

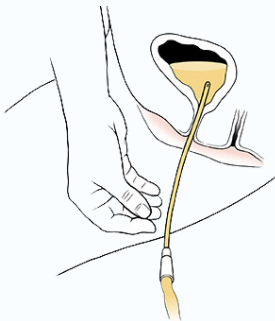

3

Ketika air seni mulai mengalir, naikan 2-3 cm secara perlahan. Ketika air seni berhenti mengalir, lepaskan kateter secara perlahan. Lalu cuci kateter dengan sabun dan bilas.

Distribusi Oleh :

AXION Healthindo
PT. Bio Axion Healthindo

Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G No. 39-42,
Jl. RS. Fatmawati Raya No.15 8, RT.8/RW.6, Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12420