

AKUTES STRIP

AKUTES COMPACT



BOX @ 25 AMPLOP @ 1 SACHET @ 1 STRIP

KEMENKES RI AKD 20101120313




SHOWBOX @ 10 BOX @ 1 SACHET @ 1 KASET

KEMENKES RI AKD 20101220516

KONIMEX

KONIMEX[®]
DIAGNOSTIC CENTER

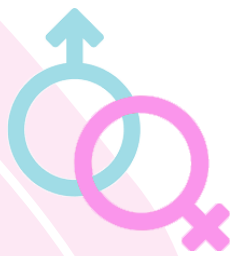


AKUTES STRIP & AKUTES COMPACT

AkuTes adalah alat uji kehamilan untuk mendeteksi adanya hormon hCG (human Chorionic Gonadotropin) dalam urin dengan kepekaan hingga 25 mIU/ml urine

Cara Pembacaan Hasil

- Jika muncul satu garis merah, hasilnya adalah negatif (tidak hamil)
- Jika muncul dua garis merah, hasilnya adalah positif (hamil)
- Jika tidak muncul garis merah, hasilnya invalid. Ulangi tes dengan menggunakan strip baru

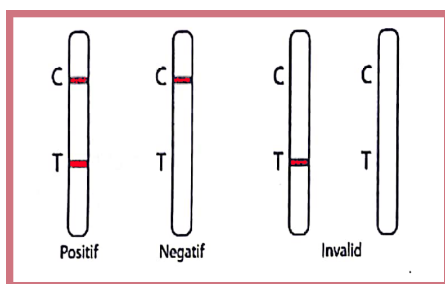

Garis merah yang muncul meyakinkan bahwa tes telah dilakukan dengan baik, jika anda ragu, maka lakukanlah tes kembali dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari kemudian.

Petunjuk Pemakaian AKUTES STRIP

- Tampung urin dalam wadah bersih dan kering, disarankan urin pagi hari karena konsentrasi hCG pada urin paling tinggi
- Buka kemasan aluminium foil, ambil strip dan celupkan ke sampel urin sampai batas garis tanda "MAX" selama 30 detik
- Angkat strip, tunggu 1 sampai 3 menit, bacalah hasil segera

Petunjuk Pemakaian AKUTES COMPACT

- Buka kemasan aluminium foil, ambil alat uji, buka penutup kaset dan kukuri dengan urin selama 30 detik
- Pasang kembali penutup kaset, tunggu 1 sampai 3 menit, bacalah hasil segera
- Disarankan lakukan pengujian pada pagi hari karena konsentrasi hCG paling tinggi

Perhatian


- Jangan membuka kemasan aluminium jika strip tidak langsung digunakan
- Jangan sentuh area tes pada strip
- Simpan pada suhu dibawah 30°C
- Untuk penggunaan luar (invitro test)
- Kantong berisi desiccant tidak digunakan untuk tes. Fungsinya untuk menjaga kelembaban udara dalam kantong hingga tes dilakukan

Penyimpanan

Simpan pada suhu di bawah 30°C.

Peringatan

Hanya untuk sekali pakai

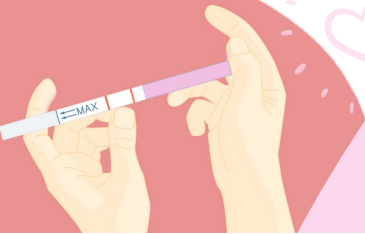

KONIMEX

KONIMEX[®]
DIAGNOSTIC CENTER