

ALAT DETEKSI CEPAT HEPATITIS B

KODC HBsAg

KODC HBsAg didesain untuk mendeteksi keberadaan komponen antigen permukaan dari virus Hepatitis B (HBsAg) di dalam sampel darah maupun serum.

PERFORMA

Performa untuk sampel darah dan serum :

Sensitifitas : >99%

Spesifisitas : >99%

SPESIFIKASI

KODC HBsAg merupakan alat kesehatan golongan invitro diagnostik berbentuk kaset yang ditujukan untuk deteksi infeksi Hepatitis B

Spesimen : Darah Utuh & Serum

Volume Spesimen : 2 tetes (40 µl)

Batas Deteksi*

- Sampel darah utuh : 400 IU/mL

- Sampel serum : 50 IU/mL

Waktu Pengujian : ± 10 menit

Expired date : 24 Bulan

TIDAK DIPENGARUHI

- Acetaminophen 20 mg/dL
- Acetylsalicylic acid 20 mg/dL
- Ascorbic acid 20 mg/dL
- Caffeine 20 mg/dL
- Ephedrine 20 mg/dL
- Phenylpropanolamine 20mg/dL
- Salicylic acid 20 mg/dL
- EDTA 80 mg/dL
- Ethanol 1%

TIDAK BEREAKSI SILANG

- HAV
- HCV
- Dengue
- Malaria

ISI


- 25 Sachet @ 1 Kaset & 1 Tip Penetes
- 1 Botol Buffer

PENYIMPANAN

Simpan dibawah suhu 30°C




CARA PENGGUNAAN

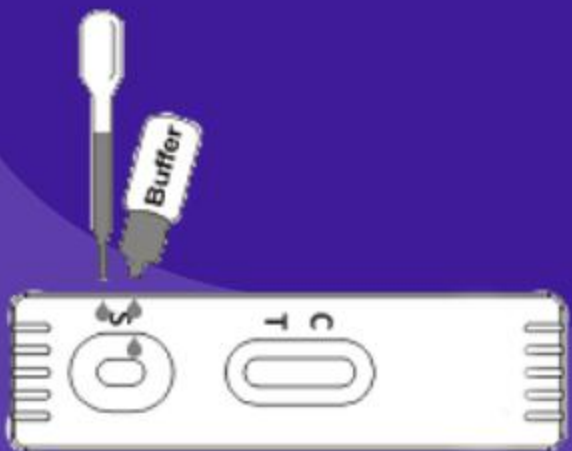

- Teteskan 2 tetes (40 µL) sampel (darah utuh/serum) pada kaset
- Tunggu 10 detik, teteskan satu sampel dua tetes running buffer
- Tunggu 10 menit dan amati hasil

INTERPRETASI HASIL

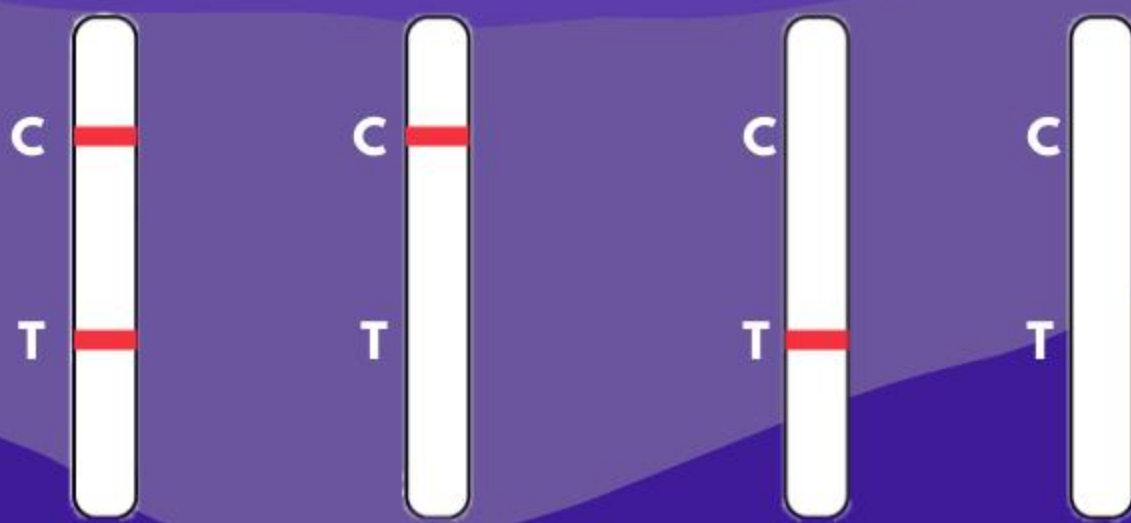

Positif

Negatif

Invalid

KEMENKES RI AKD 30305121721

Pengujian dilakukan oleh :
Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga, Surabaya

KONIMEX

KONIMEX
DIAGNOSTIC CENTER

