

KODC OVULATION

KODC OVULATION COMPACT



BOX @ 50 SACHET @ 1 STRIP
KEMENKES RI AKD 20101323691

SHOWBOX @ 10 BOX @ 1 SACHET @ 1 KASET
KEMENKES RI AKD 20101323690

Frequently Asked Questions

T : Kapan waktu terbaik untuk berhubungan intim untuk kemungkinan hamil paling besar?

J : Untuk kemungkinan hamil paling besar, hubungan intim dapat dilakukan 24-48 jam setelah hasil pengujian dengan KODC Ovulation menunjukkan hasil positif. Masa itu adalah masa dimana ovulasi terjadi.

T : Apakah KODC Ovulation dapat digunakan untuk pencegahan kehamilan?

J : KODC Ovulation bukan alat kontrasepsi dan tidak didesain untuk mencegah kehamilan.

T : Apakah tes ini bisa menjadi pengganti pengujian kesuburan lainnya?

J : Pengujian dengan alat KODC Ovulation hanya salah satu cara membantu memperkirakan kapan masa subur akan terjadi.

T : Apakah penggunaan obat-obatan umum akan memengaruhi hasil pengujian?

J : Komponen seperti Paracetamol, Aspirin, Asam Askorbat, Kafein, Efedrin, Fenilpropanolamin, Asam Salisilat, EDTA, Alkohol, Protein dan Gula tidak memengaruhi pengujian.

T : Mengapa pengujian tidak menggunakan urin pagi hari?

J : Pada beberapa wanita, peningkatan kadar LH di urin belum terjadi di pagi hari.

T : Mengapa harus mengurangi konsumsi air 2 jam sebelum pengujian?

J : Agar kadar LH tidak terencerkan oleh air.

T : Apakah hasil dapat dibaca sebelum 10 menit?

J : Tidak, karena garis uji dan kontrol belum terwarnai sempurna.

T : Apa yang memengaruhi ketebalan garis kontrol?

J : Ketebalan terjadi akibat perbedaan kandungan urin yang bervariasi, namun tidak masalah jika garis kontrol tetap muncul.

T : Apakah jika latar belakang alat berwarna merah berarti menunjukkan alatnya rusak?

J : Alat rusak hanya bila garis control tidak muncul. Warna merah dapat terjadi karena kandungan urin yang bervariasi.

T : Berapa lama harus melakukan pengujian?


J : Pengujian dapat dilakukan 6 hari berturut-turut atau hingga peningkatan kadar terdeteksi. Atau sesuai saran dan petunjuk dokter.

T : Jika masih belum bisa menentukan masa subur apa yang harus dilakukan?

J : Pengujian dapat dilakukan selama satu bulan dengan melihat intensitas garis uji. Dari pengamatan intensitas dapat ditentukan bahwa masa subur terjadi saat ketebalan garis paling tinggi.

T : Jika pengujian menunjukkan positif namun setelah melakukan hubungan badan masih tidak hamil, apa yang harus dilakukan?

J : Kehamilan dapat dipengaruhi banyak faktor, sehingga hasil yang diperoleh harus dikonsultasikan ke dokter.

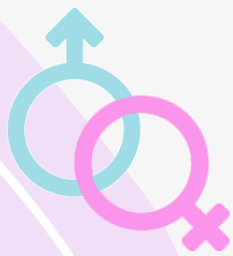


KODC OVULATION & KODC OVULATION COMPACT

KODC Ovulation dan KODC Ovulation Compact adalah alat uji masa subur untuk mendeteksi adanya hormon Luteinizing Hormone (LH) dalam urin dengan kepekaan hingga 25 mIU/ml urin.

Cara Pembacaan Hasil

- Jika garis warna yang bawah lebih gelap atau sama dengan garis warna yang atas, maka ovulasi akan terjadi dalam 24-48 jam kedepan. (Positif)
- Jika garis warna yang bawah lebih muda dibandingkan garis warna yang atas atau garis warna yang atas saja yang terlihat, maka ovulasi belum akan terjadi. (Negatif)
- Jika tidak terlihat garis warna atas, ulangi tes. (Invalid)

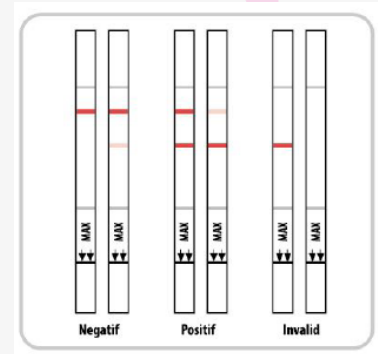

Petunjuk Pemakaian

KODC OVULATION



KODC OVULATION COMPACT



Perhatian


- Jangan membuka kemasan aluminium jika alat tidak langsung digunakan
- Jangan sentuh area tes atau petunjuk hasil pada alat
- Untuk penggunaan luar (invitro test)
- Disarankan tes dilakukan lebih dari 1 hari hingga terdeteksi kenaikan LH yang ditandai dengan hasil positif. (Disarankan 6 hari berturut-turut)
- Sebaiknya gunakan urin diantara pukul 10.00-22.00
- Kurangi konsumsi air 2 jam sebelum melakukan tes

Penyimpanan

Simpan pada suhu di bawah 30°C.

Peringatan

- Hanya untuk sekali pakai.
- Kantong desikan tidak untuk tes.

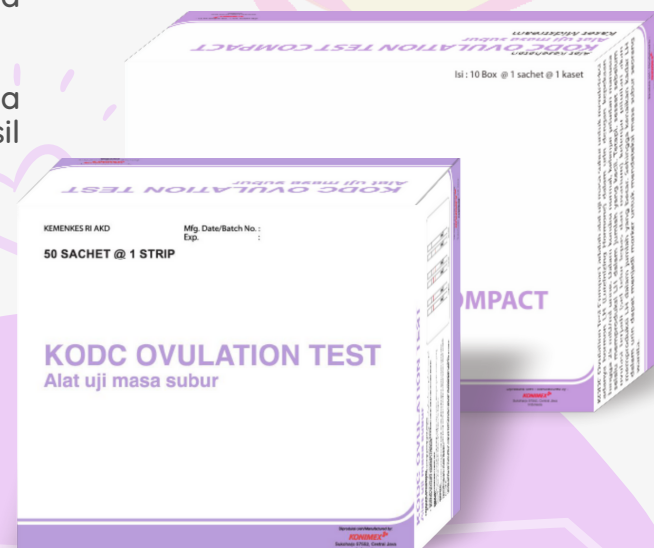

KONIMEX

AXION Healthindo

KONIMEX
DIAGNOSTIC CENTER