

KODC Toxoplasma

KODC Toxoplasma merupakan alat deteksi cepat dengan prinsip imunokromatografi yang didesain untuk mendeteksi keberadaan parasit Toxoplasma gondii berdasarkan SAG1.

PERFORMA

Performa untuk sampel darah dan serum :
Sensitifitas : >99%
Spesifisitas : >99%

SPESIFIKASI

KODC Toxoplasma merupakan alat kesehatan golongan invitro diagnostik berbentuk kaset yang ditujukan untuk deteksi Toxoplasma gondii secara kualitatif

Spesimen	: Darah Utuh & Serum
Volume Spesimen	: 1 tetes (20 µl)
Batas Deteksi	: 50 ng/ml protein SAG1
Waktu Pengujian	: ± 20 menit
Expired date	: 24 Bulan

TIDAK DIPENGARUHI

- Acetaminophen 20 mg/dL
- Acetylsalicylic acid 20 mg/dL
- Ascorbid acid 20 mg/dL
- Caffeine 20 mg/dL
- Ephedrine 20 mg/dL
- Phenylpropanolamine 20mg/dL
- Salicylic acid 20 mg/dL
- Ethanol 1%

TIDAK BEREAKSI SILANG


- Antigen Dengue
- Antigen Malaria
- Antigen Salmonella typhi

ISI


- 10 Sachet @ 1 Kaset & 1 Tip Penetes
- 1 Botol Buffer

PENYIMPANAN

Simpan dibawah suhu 30°C

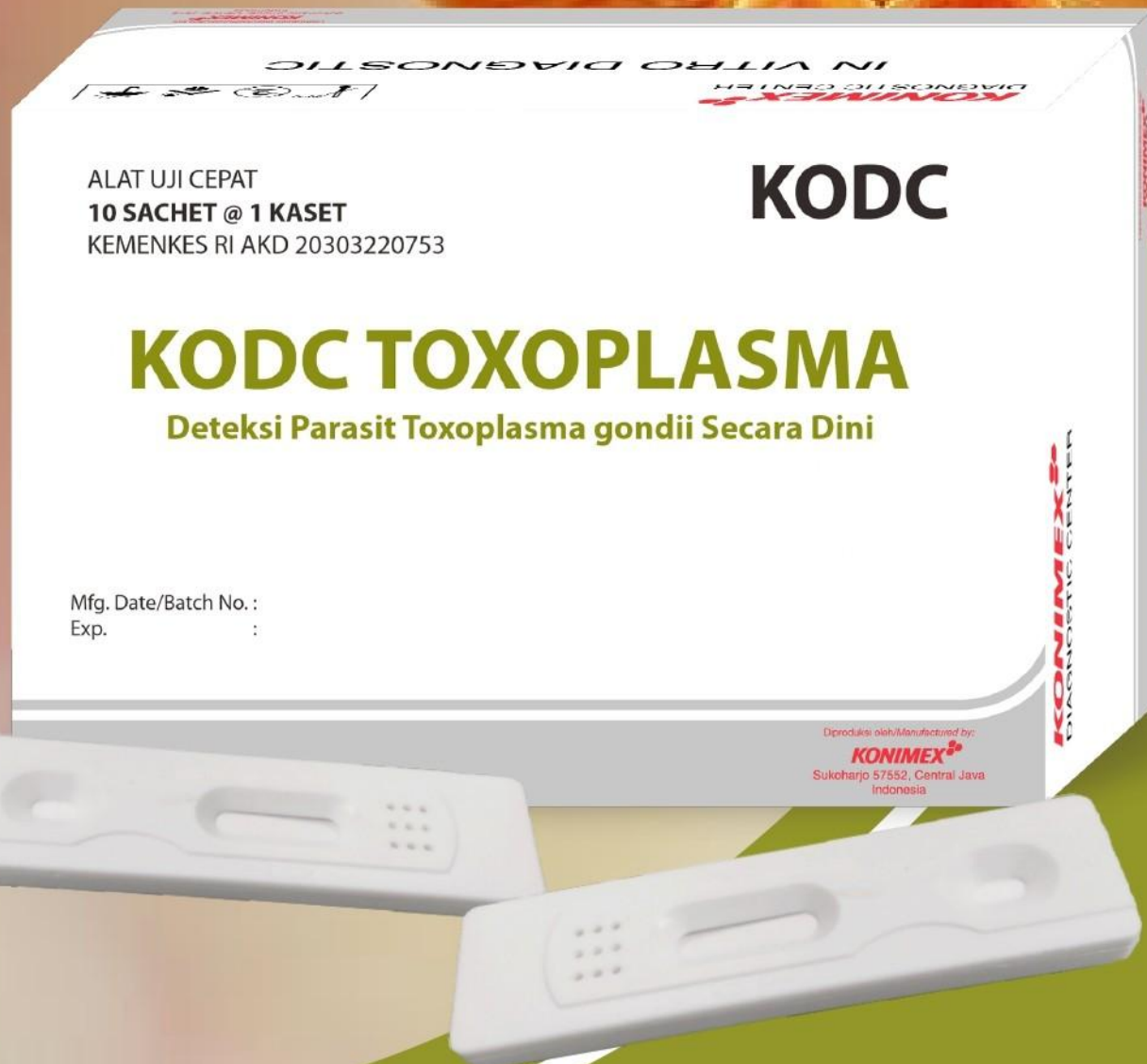

CARA PENGGUNAAN

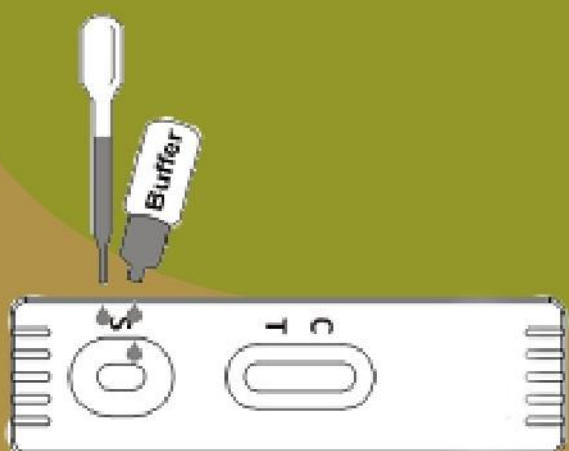

- Teteskan 1 tetes (20µL) sampel (darah utuh/serum) pada kaset
- Tunggu 10 detik, teteskan dua sampai tiga tetes running buffer
- Tunggu 20 menit dan amati hasil

INTERPRETASI HASIL

